

# HomeRay



Radiologia domiciliare, ridefinita. Potente. Completa. Semplice.

# HomeRay

Oggi la radiologia domiciliare è più richiesta che mai.

Per offrire un servizio davvero eccellente, non basta essere presenti: servono strumenti innovativi e affidabili, capaci di garantire indagini diagnostiche di altissima qualità.

Con le soluzioni IBIS, trasformi la tua assistenza in un'esperienza professionale, completa e senza compromessi.



- ① **125 kV - 250 mAs - 4kW / 5kW / 8kW**  
Utilizzabili in normali impianti domestici
- ② **Connessione rapida**  
Facile adattamento sullo stativo
- ③ **XRy Switch**  
Pulsante doppio scatto con cavo spiralato da 3 mt
- ④ **SID**  
Metro di misura della corretta distanza SID
- ⑤ **DAP**  
Dosimetro bluetooth opzionale

SPL-HF 4.0: potenza e affidabilità senza compromessi.

Grazie alla sua elevata capacità di erogazione, questo generatore garantisce la dose necessaria per qualsiasi tipo di esame, assicurando performance di livello professionale ovunque tu sia.

Valigia in alluminio per un trasporto sicuro e ordinato.

Completa il set il dosimetro con batteria ricaricabile e display ad alto contrasto, per misurazioni precise e immediate.



- ① **3 formati disponibili**  
36x43cm - 43x43cm - 25x32cm
- ② **Interfaccia Wi-Fi**  
Connessione wireless veloce
- ③ **OLED display**  
Mostra lo stato del pannello
- ④ **Incavi di presa**  
Per un facile e sicuro trasporto
- ⑤ **Alta capacità di carico**  
Fino a 400 kg (su intera superficie)

Wireless Digital Panels: libertà e prestazioni al top. Disponibili in tre formati con scintillatore al cesio, questi pannelli wireless supportano fino a 400 kg, garantendo la massima versatilità: dagli esami agli arti fino alle immagini della colonna vertebrale per pazienti allettati.


Si connettono in pochi istanti al software e offrono un'immagine diagnostica in soli 2 secondi. Rapidità, affidabilità e qualità senza compromessi.

# HomeRay




- ① **Laptop**  
Computer leggeri, potenti ed affidabili
- ② **Altà luminosità**  
Visione chiara e nitida in ogni situazione
- ③ **VxVue Software**  
Software full dicom di acquisizione e post processing
- ④ **Connessione rapida**  
Collegamento veloce al detettore senza lag
- ⑤ **Storage**  
Grande capacità di salvataggio degli studi

Software all'avanguardia per immagini perfette. Grazie ai migliori algoritmi di post-processing disponibili sul mercato, ogni immagine viene elaborata e ottimizzata nei minimi dettagli, con curve di colore bilanciate per una qualità diagnostica superiore. L'hardware fornito garantisce massima velocità di elaborazione e ampia capacità di archiviazione, per un flusso di lavoro rapido, sicuro e senza interruzioni.

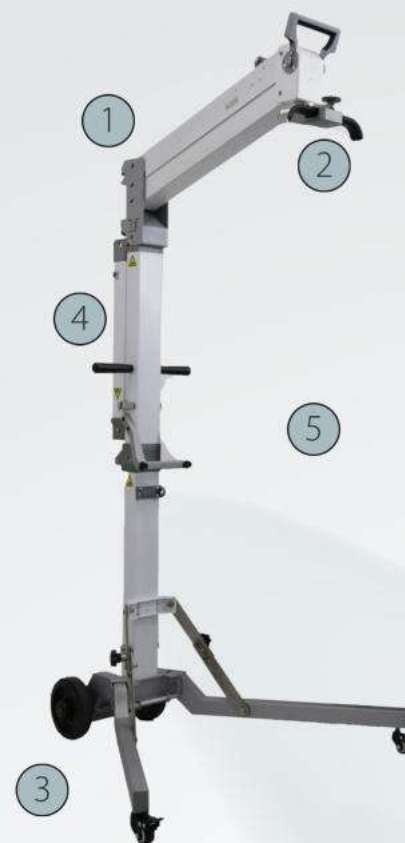

- ① **Stand**  
Disegnato per offrire la massima sicurezza
- ② **Connessione rapida**  
Facile e veloce connessione del generatore
- ③ **Maneggevole**  
Posizionamento veloce e semplice
- ④ **Altezza regolabile**  
Due blocchi e braccio controbilanciato
- ⑤ **Ampia escursione**  
S.I.D. variabile da 10cm a 170cm

Supporto estremamente robusto per la massima sicurezza. Progettato per garantire stabilità e protezione sia per l'operatore che per il paziente durante ogni utilizzo. La possibilità di smontaggio lo rende perfetto per esami a domicilio, mentre il sistema di aggancio rapido del generatore assicura un montaggio semplice e veloce. Affidabilità, praticità e sicurezza in un unico accessorio.

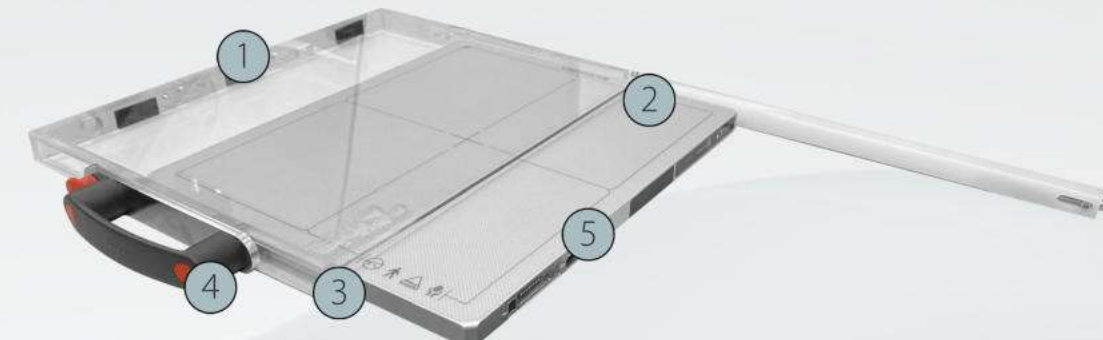

- ① **Protezione**  
Per proteggere al meglio il detettore digitale
- ② **Apertura facilitata.**  
Un sistema di apertura semplice e immediato
- ③ **Sistema di blocco**  
Per evitare aperture accidentali
- ④ **Maniglia riposizionabile**  
Su tre lati per la massima flessibilità
- ⑤ **Formati**  
Disponibile per tutti i modelli di detettore

Progettata per proteggere i rilevatori di radiografia digitale durante l'uso, il trasporto e lo stoccaggio, questa soluzione è realizzata con materiali ultra-resistenti come il polycarbonato, garantendo massima protezione dagli urti senza compromettere la qualità delle immagini. Accesso immediato a pulsante di accensione e porta di ricarica, per praticità e comfort.

# HomeRay

IBIS s.r.l. progetta e produce apparecchiature medicali per la radiologia dal 2001, mantenendo elevati standard qualitativi in tutto il processo produttivo.

L'azienda è specializzata nella produzione di unità mobili da corsia, archi a "C" e apparecchiature radiologiche veterinarie. La gamma di prodotti è completata dalla distribuzione di sistemi radiologici portatili per uso domiciliare e dalla linea di rilevatori digitali.



CE 0051



**IBIS s.r.l.**

Via Cascina Bruciata, 3 24068 Seriate, Bergamo - Italia  
[www.ibisray.it](http://www.ibisray.it) - [info@ibisray.it](mailto:info@ibisray.it) - Tel.: 035 4236343

[www.ibisray.it](http://www.ibisray.it)



Cod. 3571