


Simply dr
X RAY SYSTEM

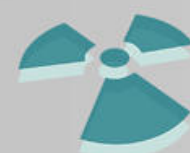

 **ibis**
X RAY SYSTEMS

Simply DR è un'unità mobile leggera e maneggevole, dotata di un sistema di acquisizione digitale diretta. È compatibile con diversi formati di detettori, rendendola estremamente versatile. Ideale per attività diagnostiche in corsia e in pronto soccorso, si distingue per il peso contenuto e la facilità di movimentazione.

Queste caratteristiche la rendono la soluzione ottimale per l'utilizzo in reparti di degenza, pronto soccorso e sale gessi.

Sistema di acquisizione

Il sistema di acquisizione a bordo permette la gestione dei parametri radiologici, l'archiviazione degli esami acquisiti, il post processing delle immagini, il salvataggio e l'invio degli studi a qualunque PACS ospedaliero.

Il software fornisce la possibilità di selezionare parte anatomica e proiezione predisponendo istantaneamente il generatore con i parametri radiologici adeguati.


L'apparecchiatura può essere connessa alla rete intranet tramite cavo o tramite connessione wireless.




Spegnimento Automatico

Simply DR è dotato di un sistema di spegnimento automatico che interviene dopo 30 minuti di inattività, proteggendo l'inserito e contribuendo a prolungare la durata dell'apparecchiatura. Il gruppo di continuità integrato consente di spostare il dispositivo tra i reparti senza interrompere l'alimentazione del computer, garantendo continuità operativa e massima efficienza.

Sistema dosimetrico

Simply dr può essere equipaggiato con DAP; i valori di dose acquisiti dal dosimetro vengono registrati nello studio ed abbinati quindi al paziente tramite DOSE-SR.

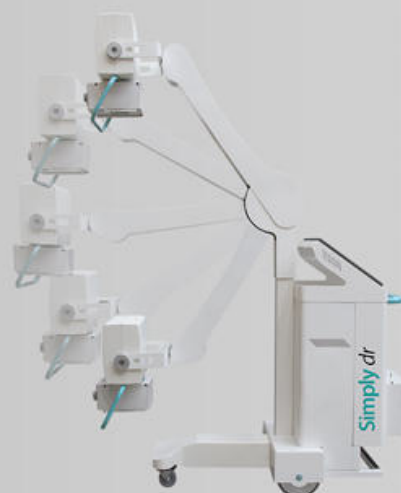

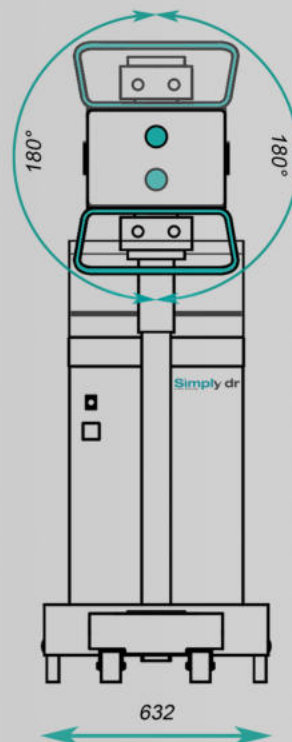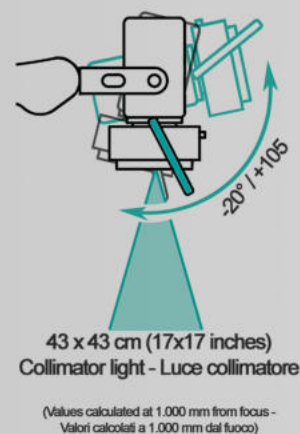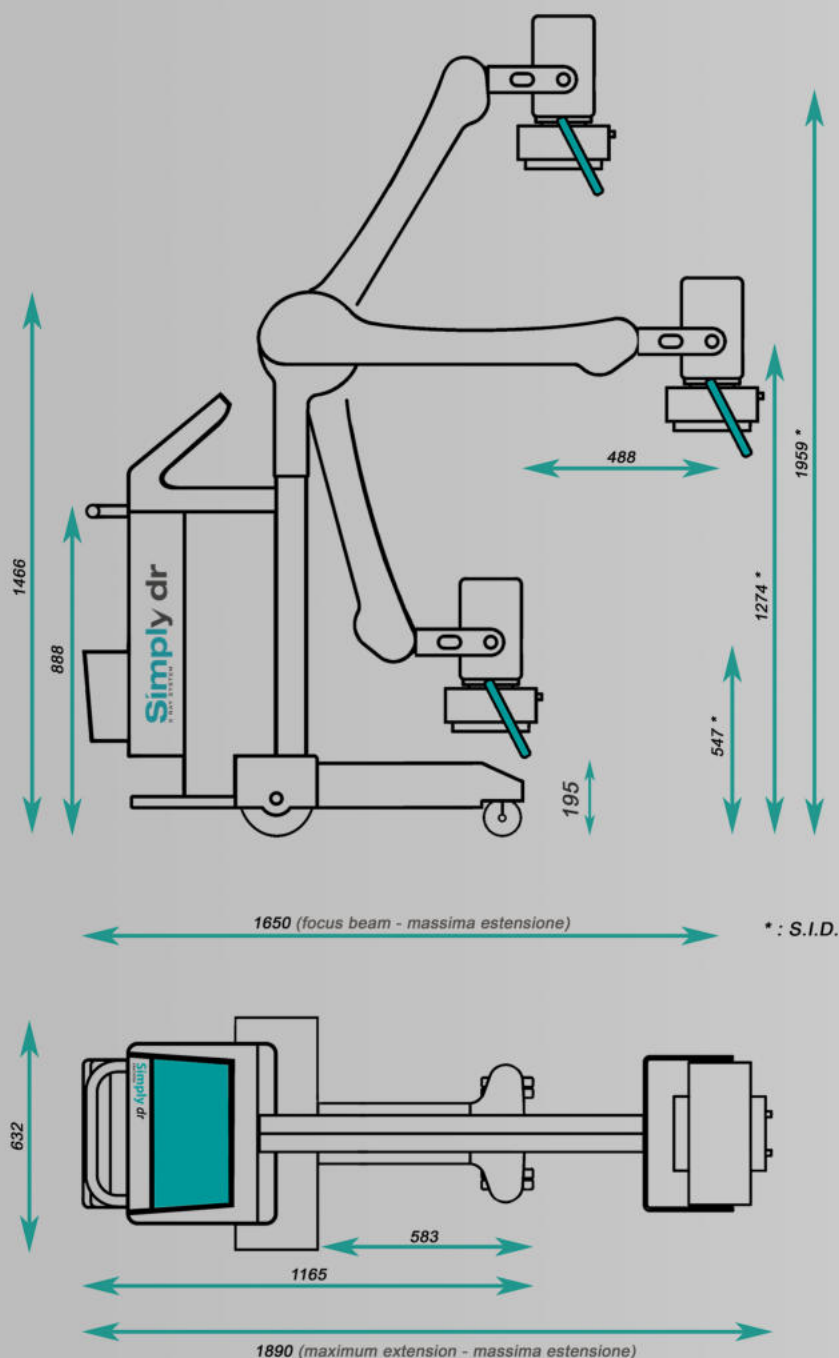

Specifiche tecniche


Potenza: 32 kW
 kV range: 40-125 kV
 mAs range: 0,2-220 mAs (28 steps)
 Focal Spot: 0,6-1,3 mm
 Cap. termica : 900 kJ - 1024 KHU
 Alimentazione: 230Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz

Massimi mA: 400 mA
 Frequenza: 100 kHz
 Monitor: 22" Touch screen
 Tempo di acq.: ~ 3 secondi
 Formato pannelli: 25x30-36x43-43x43cm
 Dosimetro: Opzionale

Le specifiche possono variare senza necessario preavviso

IBIS s.r.l. progetta e produce apparecchiature medicali per la radiologia dal 2001 mantenendo elevati standard di qualità nell'intero processo produttivo. L'azienda è specializzata nella produzione di unità da corsia mobili, archi a "C" ed apparecchiature radiologiche per veterinaria.

La gamma prodotti si completa con la commercializzazione di dispositivi radiologici portatili per uso domiciliare e con la gamma dei pannelli detettori digitali.

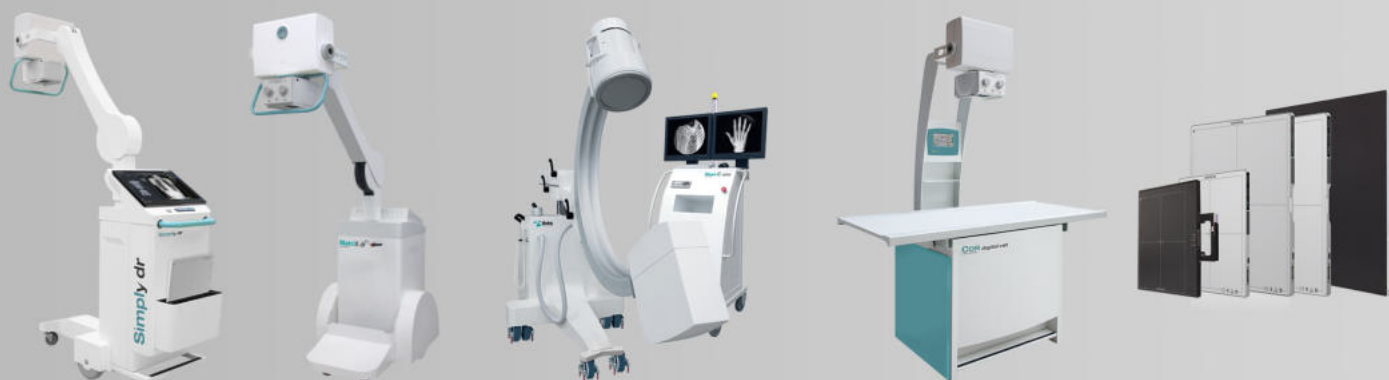

CE 0051



IBIS s.r.l.

Sede Operativa: Via cascina bruciata, 3 24068 Seriate, Bergamo - Italia
www.ibisray.it - info@ibisray.it - Tel.: 035-4236343

www.ibisray.it



Cod. 3579