

Simply HP

X RAY SYSTEM



Simply e' l'unita' mobile leggera e maneggevole per la massima liberta' di movimento. Ideale per attivita' diagnostiche in corsia e pronto soccorso.

Il peso contenuto e la semplicita' della movimentazione lo rendono lo strumento piu' valido per corsie di degenza, pronto soccorso e sale gesso.




Tecniche Radiologiche

Tecnica radiologica a due punti con scelta di kV e mAs o tecnica radiologica a tre punti con scelta di kV, mA e ms. Tutti i valori selezionati sono visualizzati sul display touch screen.

Tecniche Anatomiche

E' possibile programmare e richiamare fino a 240 esami attraverso la tastiera virtuale sul touch screen.

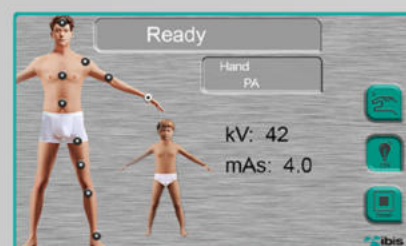




Sistema dosimetrico

Simply puo' essere equipaggiato con DAP. I dati del paziente possono essere inseriti attraverso la tastiera virtuale; i dati della dose possono essere stampati per opportuna archiviazione.

Spegnimento Automatico

Simply e' dotato di un sistema di spegnimento automatico che spegne l'apparecchiatura dopo 30 minuti di inoperativita' per prevenire danni all'inserto.



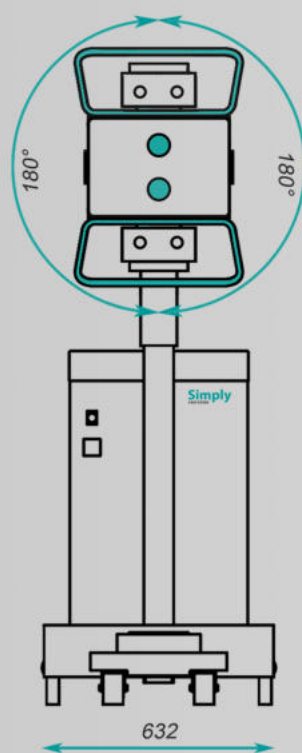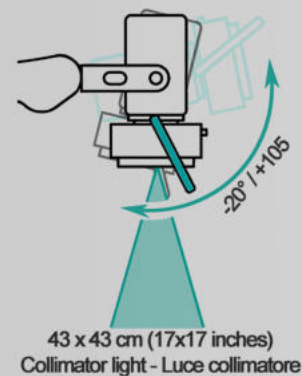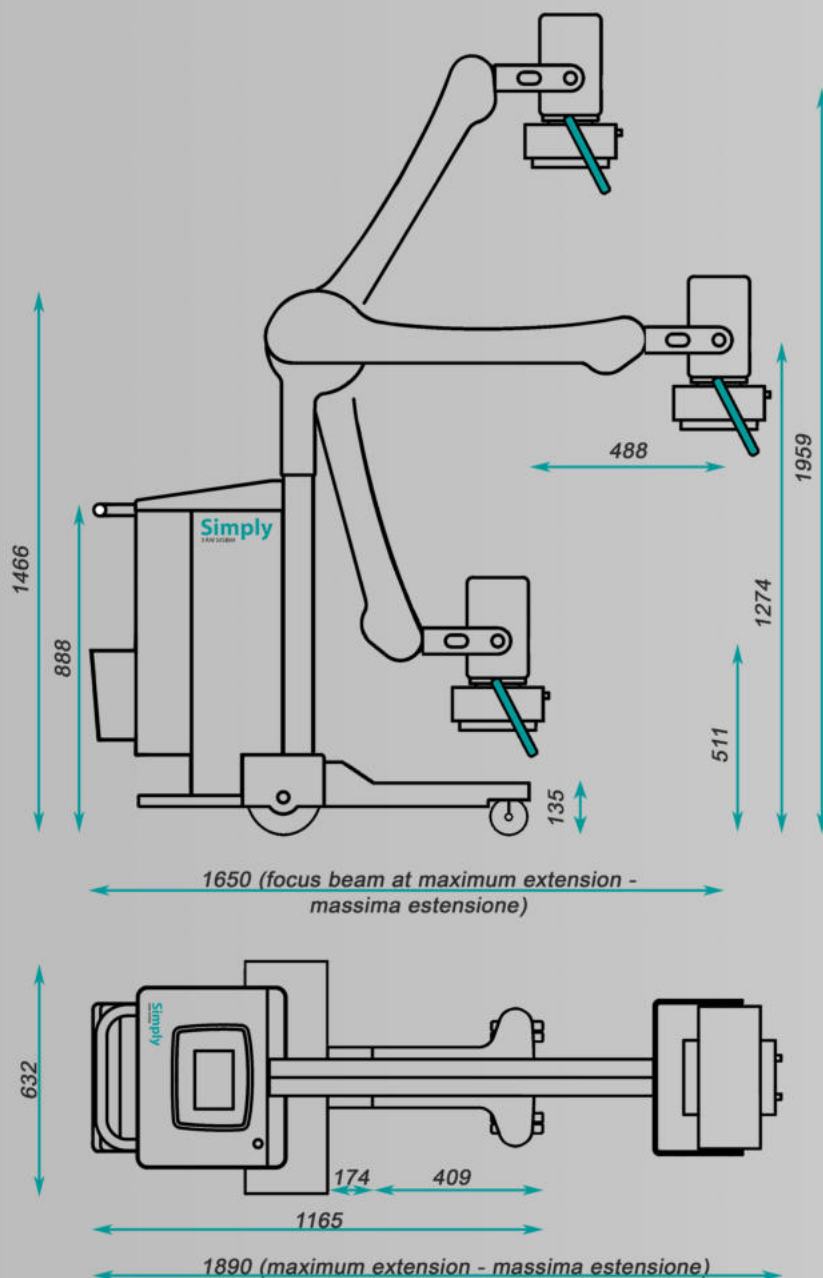

Specifiche tecniche

Potenza:	15 kW
kV range:	40-125 kV
mAs range:	0,2-220 mAs (28 steps)
Focal Spot:	0,6-1,3 mm
Cap. termica :	900 kJ - 1024 KHU
Massimi mA:	320 mA
Frequenza:	100 kHz
Alimentazione:	230Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz


Simply HP15

Simply HP32

Potenza:	32 kW
kV range:	40-125 kV
mAs range:	0,2-220 mAs (28 steps)
Focal Spot:	0,6-1,3 mm
Cap. termica :	900 kJ - 1024 KHU
Massimi mA:	400 mA
Frequenza:	100 kHz
Alimentazione:	230Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz

IBIS s.r.l. progetta e produce apparecchiature medicali per la radiologia dal 2001 mantenendo elevati standard di qualità nell'intero processo produttivo. L'azienda è specializzata nella produzione di unità da corsia mobili, archi a "C" ed apparecchiature radiologiche per veterinaria.

La gamma prodotti si completa con la commercializzazione di dispositivi radiologici portatili per uso domiciliare e con la gamma dei pannelli detectori digitali.

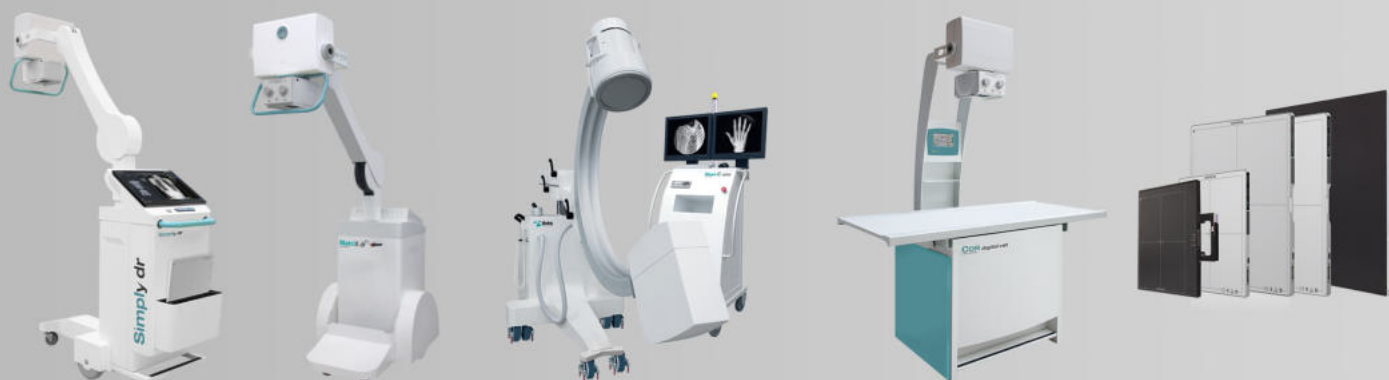

CE 0051



IBIS s.r.l.

Sede Operativa: Via cascina bruciata, 3 24068 Seriate, Bergamo - Italia
www.ibisray.it - info@ibisray.it - Tel.: 035-4236343

www.ibisray.it



Cod. 3581