

Simply evo

X RAY SYSTEM



Simply evo è l'unità mobile leggera e maneggevole per la massima libertà di movimento. Ideale per attività diagnostiche in corsia e pronto soccorso.

Il peso contenuto e la semplicità della movimentazione lo rendono lo strumento più valido per corsie di degenza, pronto soccorso e sale gesso.

La peculiarità di questo modello consiste nel poter generare raggi X, senza essere alimentato, utilizzando un pacco batterie.

Tecniche Radiologiche

Tecnica radiologica a due punti con scelta di kV e mAs o tecnica radiologica a tre punti con scelta di kV, mA e ms.

Tutti i valori selezionati sono visualizzati sul display touch screen.

Tecniche Anatomiche

È possibile programmare e richiamare fino a 240 esami attraverso la tastiera virtuale sul touch screen.




Alimentazione

Simply evo può essere utilizzato tramite il pacco batterie oppure tramite connessione alla rete elettrica. Non è necessario attendere la ricarica delle batterie per poter utilizzare l'apparecchiatura.

Sistema dosimetrico

Simply evo può essere equipaggiato con DAP. I dati del paziente possono essere inseriti attraverso la tastiera virtuale; i dati della dose possono essere stampati per opportuna archiviazione.



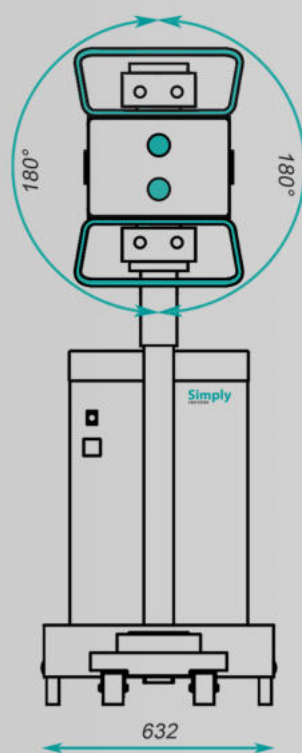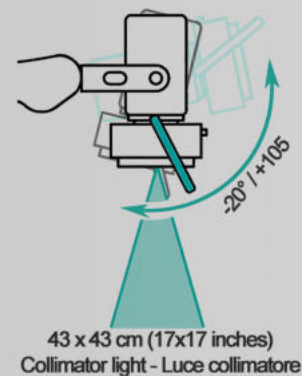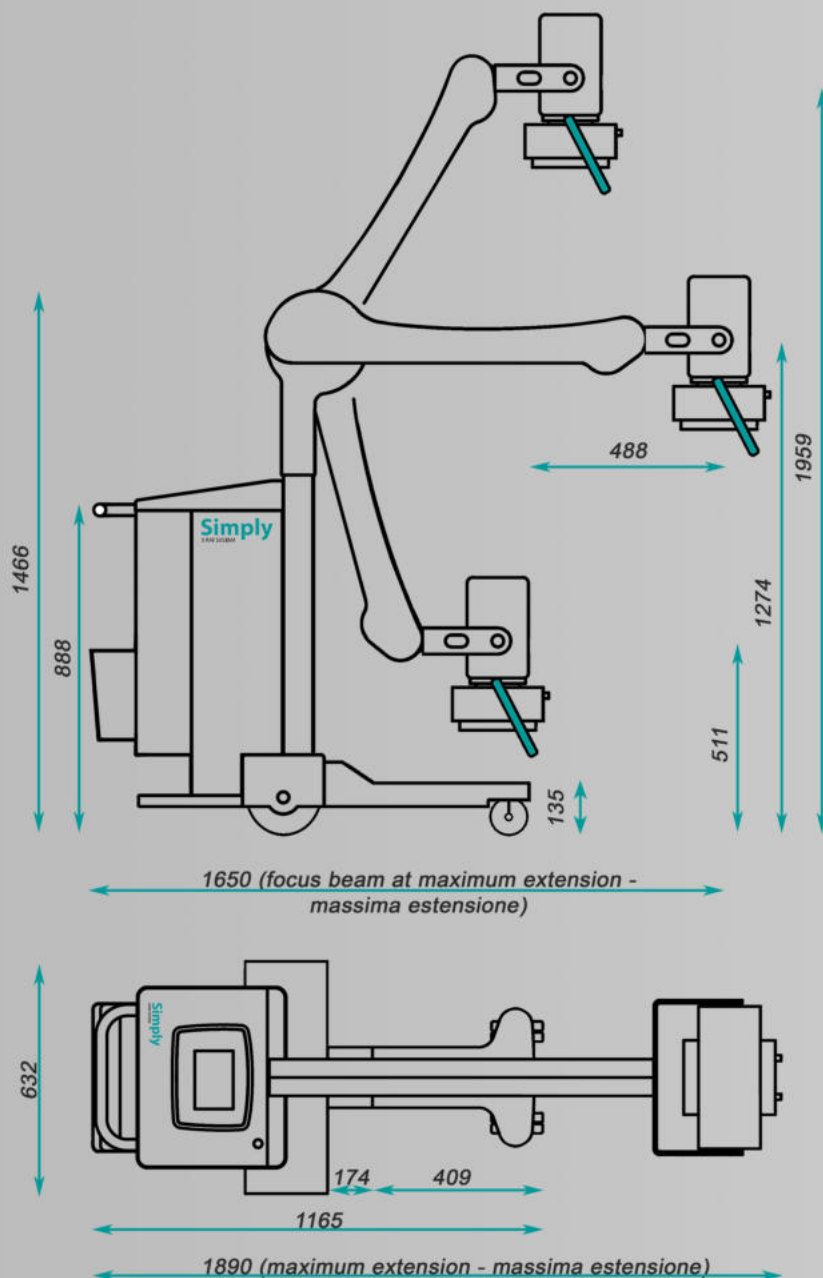


Specifiche tecniche

Simply evo

Potenza:	32 kW
kV range:	40-125 kV
mAs range:	0,2-220 mAs (28 steps)
Focal Spot:	0,6-1,3 mm
Cap. termica :	900 kJ - 1024 KHU
Massimi mA:	400 mA
Frequenza:	100 kHz
Alimentazione:	230Vac $\pm$ 10% 50/60 Hz

IBIS s.r.l. progetta e produce apparecchiature medicali per la radiologia dal 2001 mantenendo elevati standard di qualità nell'intero processo produttivo. L'azienda è specializzata nella produzione di unità da corsia mobili, archi a "C" ed apparecchiature radiologiche per veterinaria.

La gamma prodotti si completa con la commercializzazione di dispositivi radiologici portatili per uso domiciliare e con la gamma dei pannelli detectori digitali.

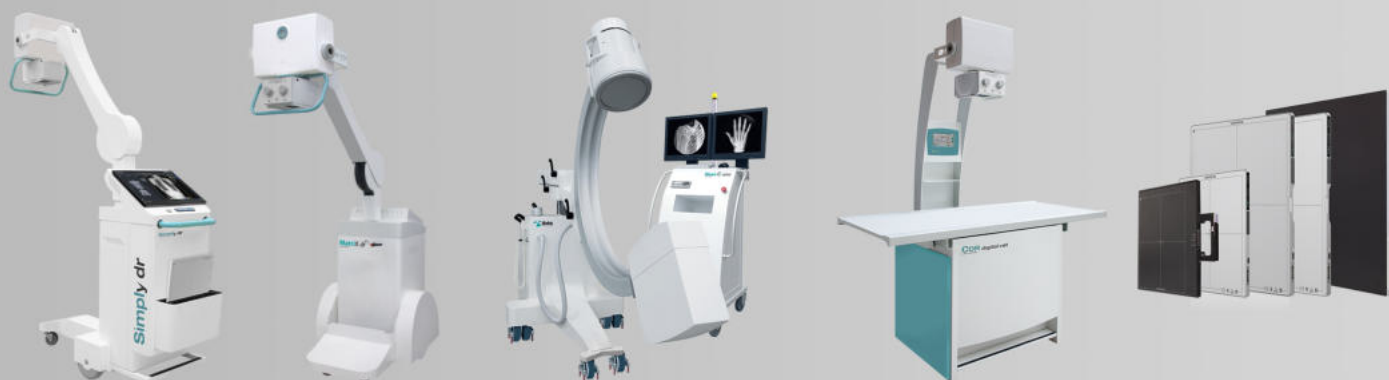

CE 0051



IBIS s.r.l.

Sede Operativa: Via cascina bruciata, 3 24068 Seriate, Bergamo - Italia
www.ibisray.it - info@ibisray.it - Tel.: 035-4236343

www.ibisray.it



Cod. 3583